

Materiaal bloedafname (foto 1)

Nrs. 1 t/m 4 bemonsteren

1. Twee paar handschoenen
2. Een (EDTA) buis met rode dop (opzuigspuit)
3. Een (Serum Gel) buis met bruine dop (opzuigspuit)
4. Buisje met Swab ("sponsje" op staaf)
5. Tissue

Nrs. 6 en 7 inpakmateriaal; in het veld

6. Absorptiemateriaal met 3 vakjes
7. Afsluitbare zak (sealbag)

Nrs 8 t/m 10 inpakmateriaal; klaarmaken voor verzending

8. Formulier (ingevuld opsturen)
9. Karton
10. Blauwe gefrankeerde envelop

Belangrijk

- Draag altijd wegwerphandschoenen.
- Neem eerst de swab uit het hart.
- Vul dan het buisje met rode dop.
- Vul dan het buisje met bruine dop.

Bemonsteren (fotos 3-11)

Makkelijke locatie bloedafname

Indien u het ree direct na het afschot ontweidt en het is geen weidwondschot, dan wordt de volgende methode geadviseerd waarbij schoon bloed wordt genomen uit de borstholte (voor het middenrif), en niet uit de buikholte. Hiervoor moet het middenrif dus heel zijn. Het bloed mag nl niet verontreinigd zijn met maag/darminhoud.
Stappen:

- Snij de huid van het bekken tot en met de hals open.
- Snij of knip borstbeenen open.
- Neem vervolgens eerst de monsters uit het hart of borstholte (foto 2), voordat het ree verder ontweidt wordt.
- Foto 3. Haal de swab uit de verpakking/buisje en doordrenk het 'sponsje' met bloed uit het hart.
- Plaats de swab terug in het buisje en sluit deze af.
- Foto 4. Haal de dop van de rode spuit.
- Foto 5. Zuig bloed op uit borstholte. Herhaal deze handeling met de bruine spuit.




Alternatieve locatie bloedafname

Is het bloed in de borstholte verontreinigd (weidwondschot), of gestold, bijv. als het ontweiden later gebeurt, is het advies om bloed op te zuigen uit een van de volgende plaatsen geschikt voor een relatief schone bloedafname.

- Foto 6, pijltje A met detail op foto 7.: De halsader.
- Foto 6, pijltje B met detail op foto 8.: De ader voor het schouderblad.
- Foto 9. Zuig bloed op uit ader.

Bij het moeilijk verkrijgen van bloed, is er de optie om het ree achter-hoog te plaatsen en het bloed op te vangen. In dat geval:

- Foto 10. Haal de gehele dop van buis.
- Foto 11. Vang het bloed op.

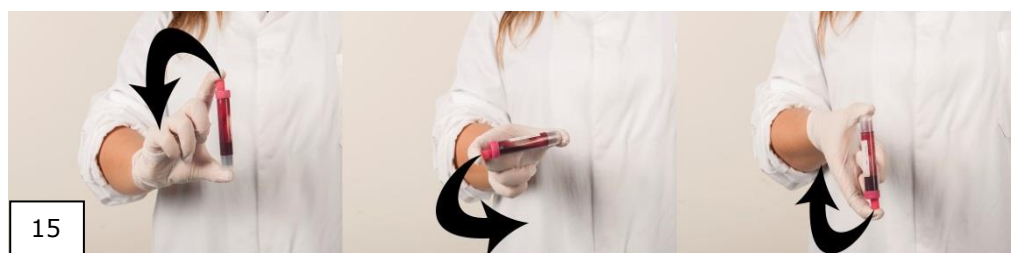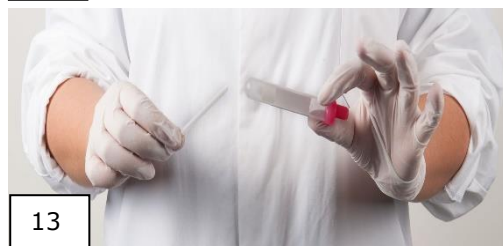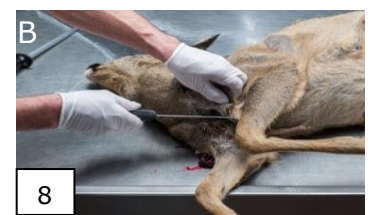

Bloedbuis afsluiten (fotos 12-15):

- Foto 12. Neem gehele spuit af met tissue. Draai vervolgens de dop erop.
- Foto 13. Breek het staafje af. Herhaal dit bij het andere buisje.

Rode buizen zwenken, bruine buis niet!

- Foto 14. Het buisje met bruine dop mag **niet** gezwenkt worden.
- Foto 15. Zwenk (**niet schudden!**) direct na afname het buisje met de rode dop een aantal keer zodat het antistollingsmiddel mengt met het bloed.

Instructie verpakken in het veld:

- Foto 16. Trek één handschoen binnenstebuiten uit.
- Foto 17. Pak met schone hand het absorptiemateriaal vast en schuif met handschoen de bloedbuisjes en de swab in de drie vakjes (buitenkant absorptiemateriaal blijft zo schoon).
- Trek na deze handeling ook de andere handschoen uit.

16



17



In het veld of thuis

Instructie verpakken in het veld/thuis:

- Foto 18. Rol het absorptiemateriaal op en plaats het in de sealbag.
- Foto 19. Verzegel de sealbag door de zilveren afdekstrip te verwijderen en de plakstrip goed aan te drukken.
- De buitenkant van de sealbag dient schoon (niet besmeurd met bloed of ander vuil) te zijn. Anders afnemen met vochtige doek.

18



19



Thuis

Instructie verpakken thuis:

- Vul het formulier in
 - DEEL 1: geheel invullen of de print uit FRS/Dora bijvoegen,
 - DEEL 2: geheel invullen.
- Foto 20. Plaats formulier + print uit FRS/Dora samen met de sealbag in het karton.
- Foto 21. Plaats het karton met inhoud in de blauwe envelop.
- Het is belangrijk dat de blauwe envelop aan de buitenkant niet besmeurd is omdat deze anders niet geaccepteerd wordt door PostNL en het dus niet bij ons aankomt.

20



21



De blauwe envelop kunt u sluiten door de roze/wit geblokte afdekstrip van de verzegeling te verwijderen en de envelop goed te sluiten. De envelop is reeds gefrankeerd en kan iedere werkdag in de brievenbus worden gedaan met uitzondering van de vrijdag na 17.00 uur. Brievenbussen worden tussen vrijdagavond en maandagavond niet geleegd. Daarom verdient het de voorkeur het materiaal dat vrijdag na 17.00 uur en/of in het weekend verzameld is, koel te bewaren (niet bevroren) en maandag op de post te doen. Dit met betrekking tot de kwaliteit van het bloed, dat sterk verminderd als het een weekend in een brievenbus ligt.

De kwaliteit van de bloedmonsters wordt zo spoedig mogelijk aan u teruggekoppeld. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u ons bereiken via:

E-mail: t.r.bakker@uu.nl
Telefoonnummer: 030-2537369

Alvast vriendelijk bedankt voor het verlenen van uw medewerking,

Nine Bakker
Dutch Wildlife Health Centre
Departement Pathobiologie
Faculteit Diergeneeskunde
Yalelaan 1
3584 CL Utrecht
Website: www.dwhc.nl